

Laboratoriemedicin


Godkänt datum 2024-02-29



Provtagningsinstruktion nasofarynx - för viruspåvisning

För påvisning av luftvägsvirus rekommenderas provtagning både från nasofarynx och från bakre svalgvägg. Efter provtagning sätts båda pinnarna ner i röret (ETT rör) och bryts av vid skåran.


Provtagningsmateriel: VCM provtagningsset

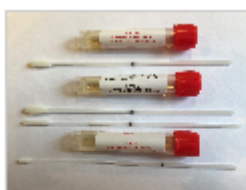

VCM Provset	Användning	Flockad pinne	Art. Nr
Röd kork 2 mL	Hud, slemhinna och svalg	Standard tip	25 481
Röd kork 2 mL	Nasofarynx och svalg	Duo swab - 1 standard tip+ 1 mini tip	27 556
Röd kork 2 mL	Pediatrisk	Ultra fine tip	25 483

Provtagaren bör bära plastförkläde, engångshandskar, munskydd samt skyddsglasögon/ visir.

1. Tryck patientens nästipp uppåt för att se bättre.
2. För in pinnen genom ena näsöppningen, horisontellt långt in längs näsbotten (se bild) tills man känner att pinnen har nått nasofarynx, i höjd med ytterörat. Försök att inte vidröra huden vid införandet.
3. Snurra pinnen ett varv och låt den vara kvar 5 sekunder för att få bra provtagningsmaterial.
4. Dra sedan odlingspinnen rakt ut med en jämn rörelse utan att vidröra huden i näsöppningarna.
5. Sätt ner pinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken ordentligt.
6. Pinnen ska vara kvar i röret under transporten till laboratoriet.
7. Provet förvaras kylt i avvaktan på transport.

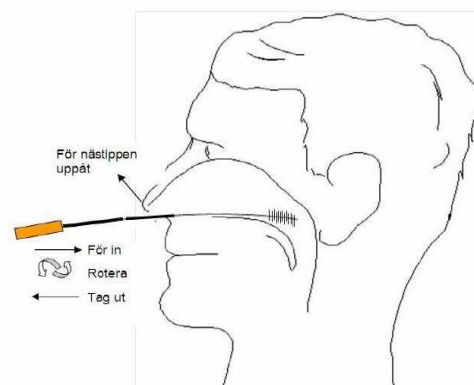

Korrekt provtagning är avgörande för analysresultatet.

Läs mer på [Vårdhandboken.se](http://Vardhandboken.se).