

Laboratoriemedicin

Godkänt datum 2024-02-29




Provtagningsinstruktion nasofarynxaspirat

Vid provtagning av van personal vid infektions- eller barnklinik kan nasofarynxaspirat ge högre känslighet.

Provtagningsmateriel

- Trachealsugset, provrör med två slangnippelar och transportkork
- Mjuk sugkateter med öppning vid spetsen, t ex nr 6, 50 cm
- 1-2 mL steril koksaltlösning.
- Suganordning. Bör ha vätskelås för att förhindra aerosolbildning.

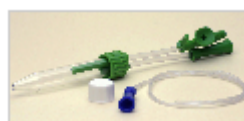

Provmateriel	Art. Nr
Sugset	14696

Provtagaren bör bära plastförkläde, engångshandskar, munskydd samt skyddsglasögon/ visir.

1. Koppla suganordningen till den trattformade nippeln på sugsetet. Koppla sugkatetern till den räfflade nippeln.
2. Sätt på sugen
3. För mjukt in katetern horisontellt (sittande patient) genom ena näsöppningen längs näsbotten. På ena slangnippeln sitter ett hål, detta skall lämnas öppet när katetern förs in respektive ut ur näshålan. Man undviker då att få med onödigt nässekret.
4. När man känner att katetern har nått nasofarynx, i höjd med ytterörat, håller man för hålet på slangnippeln så att ett undertryck skapas. Roterar katetern något under sugningen.
5. Släpp hålet på slangnippeln och drag ut katetern. Proceduren kan upprepas på andra sidan.
6. Eftersug katetern med 1-2 mL koksaltlösning så att det cellrika sekretet sköljs ner i provröret.
7. Byt till transportkork och märk röret med patientidentitet.

